

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE


28.07.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 7月31日
Date of Application:

出願番号 特願2003-284160
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP2003-284160]

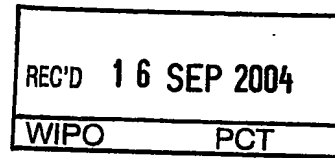


出願人 株式会社ジェイ・エム・エス
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE.17.1(a) OR (b)

2004年 9月 2日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川

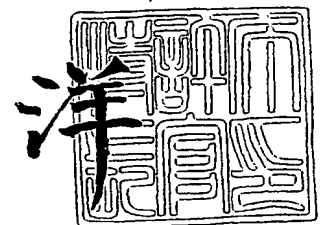

出証番号 出証特2004-3078831

【書類名】 特許願
【整理番号】 R8384
【提出日】 平成15年 7月31日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 A61M 1/14
【発明者】
 【住所又は居所】 広島県広島市中区加古町 1 2 番 1 7 号 株式会社ジェイ・エム・エス内
 【氏名】 宮原 英靖
【特許出願人】
 【識別番号】 000153030
 【氏名又は名称】 株式会社ジェイ・エム・エス
【代理人】
 【識別番号】 110000040
 【氏名又は名称】 特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ
 【代表者】 池内 寛幸
 【電話番号】 06-6135-6051
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 139757
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0107389



【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

後端部にチューブ接続部を有する雄型コネクタと、一端が閉塞された略円筒形状を有し前記雄型コネクタの先端側に着脱可能な保護キャップと、殺菌剤含浸部材を内側に保持した環状部を有し初期状態において前記保護キャップの内部に保持された内部キャップと、外筒の一端部に内筒が固定された二重筒構造を形成し、前記内筒は前記外筒内部に位置する内端部および前記外筒から露出しチューブを接続可能な外端部を有する雌型コネクタとを備え、

前記内部キャップは、前記環状部から環軸方向に延びる複数の係合脚を有し、前記係合脚の先端部外面に係合凸部が形成され、前記雄型コネクタの先端部は円筒形をなして前記係合脚の係合凸部が内側から係合可能な係合凹部を有し、前記保護キャップの内壁面には内部キャップ保持部が形成され、前記内部キャップの係合凸部と前記雄型コネクタの係合凹部との係合力は、前記内部キャップ保持部が前記内部キャップを保持する力より大であり、

前記内部キャップを保持した前記保護キャップが前記雄型コネクタに装着されたときに前記係合脚の係合凸部が前記雄型コネクタの係合凹部に係合し、前記保護キャップが前記雄型コネクタから取り外されるときに、前記内部キャップは前記雄型コネクタの先端に保持されて前記保護キャップから離脱し、前記内部キャップが保持された前記雄型コネクタが前記雌型コネクタと接続されたとき、前記内筒の内端部が、前記殺菌剤含浸部材を貫通して流路が開通する医療用コネクタシステム。

【請求項 2】

前記雌型コネクタは内部キャップ保持部を有し、前記雄型コネクタと前記雌型コネクタの接続が解除されたとき、前記内部キャップが前記内部キャップ保持部により前記雌型コネクタの内部に保持されて、前記雄型コネクタの先端から離脱するように構成された請求項 1 に記載の医療用コネクタシステム。

【請求項 3】

前記雄型コネクタは、先端部に内腔を遮蔽する隔壁部材を有し、前記内部キャップが先端に保持された前記雄型コネクタを、前記雌型コネクタと接続したとき、前記内筒の内端部が、前記内部キャップの殺菌剤含浸部材および前記雄型コネクタの隔壁部材を貫通して流路が開通する請求項 1 に記載の医療用コネクタシステム。

【請求項 4】

前記雄型コネクタの外表面は、周方向に延びる周方向段差部が形成されてその先端側が基端側よりも径小であり、更に前記周方向段差部から基端側に延びコネクタ軸方向に対して傾斜した傾斜部を含むガイド溝が形成され、前記保護キャップは、その開口端部近傍の内壁面にガイド突起が形成され、

前記保護キャップの開口部から前記雄型コネクタを挿入し、前記保護キャップの前記ガイド突起が前記雄型コネクタの前記ガイド溝に合致した状態で、前記保護キャップと前記雄型コネクタを相互に押し付けながら回転させることにより、前記ガイド突起が前記ガイド溝を摺動し、前記ガイド溝の傾斜部のねじ作用による駆動力を受けて前記雄型コネクタが前記保護キャップの奥部に引き込まれるとともに、前記内部キャップの前記係合凸部が、前記雄型コネクタの係合凹部に係合する請求項 2 に記載の医療用コネクタシステム。

【請求項 5】

前記雄型コネクタはその先端部内周面に、前記内部キャップが装着されたときその係合脚の側部に当接する制止突起を有し、前記雌型コネクタの前記外筒は、その開口端部近傍の内壁面に形成されたガイド突起、およびコネクタ軸方向に対して傾斜した傾斜部を含むガイド段差部を有し、前記内部キャップは、前記環状部の外周面に突起を有し、

前記内部キャップを保持した前記雄型コネクタを前記雌型コネクタの開口部から挿入し、前記外筒の前記ガイド突起が、前記雄型コネクタの前記ガイド溝に合致した状態において、前記雌型コネクタと前記雄型コネクタを相互に押し付けながら回転させることにより、前記ガイド突起が前記ガイド溝を摺動し、前記ガイド溝の傾斜部のねじ作用による駆動

力を受けて前記雄型コネクタが前記雌型コネクタの奥部に引き込まれるとともに、前記内部キャップの前記係合脚が前記雄型コネクタの制止突起により前記雄型コネクタに対する回動を規制された状態で、前記環状部の突起が前記雌型コネクタのガイド段差部の傾斜部を摺動し、前記内部キャップに対して前記雄型コネクタから離間する向きの軸方向の力が作用して、前記内部キャップと前記雄型コネクタの係合が解除され、更に、前記内部キャップが、前記外筒の内部キャップ保持部に保持された状態になる請求項 4 に記載の医療用コネクタシステム。

【請求項 6】

前記雌型コネクタの前記内部キャップ保持部は、前記ガイド段差部の前記傾斜部の奥側に連続して設けられた水平段差部により構成され、前記内部キャップの前記環状部の突起が前記水平段差部に当接することにより、前記内部キャップは前記外筒の開口側に向かう軸方向の移動を阻止され、前記雌型コネクタ内に保持される請求項 5 に記載の医療用コネクタシステム。

【請求項 7】

前記雌型コネクタの前記内部キャップ保持部は、前記外筒の内壁の一部が前記内部キャップの環状部外周面に当接するか、または前記内筒の内端部外壁の一部が前記内部キャップの環状部内周面に当接するように寸法を設定することにより構成され、前記内部キャップが摩擦力で保持される請求項 5 に記載の医療用コネクタシステム。

【請求項 8】

請求項 1 に記載の医療用コネクタシステムに用いられ、一端が閉塞された略円筒形状を有する前記保護キャップと、その保護キャップの奥部に保持され、殺菌剤含浸部材を環状部の内側に保持する前記内部キャップとを備えた保護キャップ組立体であって、

前記保護キャップの内壁面には前記内部キャップを保持する内部キャップ保持部が形成され、前記内部キャップは、前記環状部の周縁部から環軸方向に延びる複数の係合脚を有し、前記係合脚の先端には外側に突出した係合凸部が形成され、前記内部キャップが、前記係合脚の先端を前記保護キャップの開口側に向けて前記内部キャップ保持部に保持された保護キャップ組立体。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 医療用コネクタシステム

【技術分野】

【0001】

本発明は、例えば医療用の液体流路を形成するチューブ等を接続するための医療用コネクタシステムに関する。特に、接続と離脱を繰り返す際に、簡易な操作により接続部分の殺菌が確実に行われる機能を備えた医療用コネクタシステムに関する。

【背景技術】

【0002】

医療用コネクタとしては、例えば、腹膜透析用の透析液交換に際して患者側トランスファーチューブ（エキステンションチューブ）と腹膜透析装置とを接続するためのコネクタが知られている。腹膜透析は、あらかじめ患者の腹腔に外科的に埋植した腹膜カテーテルを介して透析液を腹腔内に貯留し、腹膜の毛細血管を利用して体内に溜まった不純物をろ過する療法である。患者は、カテーテルの先に半年間連続使用するトランスファーチューブ（エキステンションチューブ）を接続した状態で、日常の生活を送る。そして、患者自身が一日4回、透析液の入ったバッグをトランスファーチューブ先端に接続し、腹腔内の透析液を交換する。

【0003】

この腹膜透析を行う上で最も問題となるのは、この1日4回も行う透析液交換時に、誤って空気中や皮膚に付着した細菌が透析液と共に腹腔内に入ってしまうことである。仮に細菌が腹腔内に入ると、腹膜が炎症を起こし腹膜炎を発症する。

【0004】

そこで、腹膜透析を行う場合、透析液を交換する際にトランスファーチューブと腹膜透析装置とを接続するコネクタについて、細菌による汚染を低減することが重要である。従来、チューブを熱した銅版で溶断してチューブ同士を接続したり、接続部分を紫外線で殺菌することによって、細菌による汚染を防止するという製品が市販されている。しかしながらこれらの製品は、かならず専用の機械と製品を必要とすることから、患者は必ず機械を携帯する必要がある上、機械が故障した場合には重篤な問題となりかねない。

【0005】

一方、機械を必要としない接続部材で、かつ細菌による汚染を防止できるコネクタについても、多くの構造が検討されている。その主なものとして、セプタム（隔壁、隔膜）を用いて、接続する際にこのセプタムを押し開き嵌合する構造、あるいは、フィルムで接続部を覆い、このフィルムを破壊することによって嵌合する構造などが、アイデアとして提案されている。（例えば特許文献1、特許文献2参照）

【特許文献1】 米国特許第4,610,469号

【特許文献2】 特開平6-312014号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかしながら従来知られている構造のコネクタはいずれも、機構が複雑であったり、サイズが大きかったり、また必要な機能が十分に得られない、等により実用化にはいたっていない。特に、接続と離脱が繰り返し行われる際の、細菌による汚染を防止するための構造を十分に配慮したものはない。

【0007】

このような問題は、腹膜透析用のチューブを接続するコネクタに限らず、一般の輸液等の、液体流路を接続することを要する箇所用いられるコネクタについて共通する。

【0008】

そこで本発明は、液体流路の接続に際して、簡易な操作により細菌汚染を減少させることが可能な医療用コネクタシステムを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明の医療用コネクタシステムは、後端部にチューブ接続部を有する雄型コネクタと、一端が閉塞された略円筒形状を有し前記雄型コネクタの先端側に着脱可能な保護キャップと、殺菌剤含浸部材を内側に保持した環状部を有し初期状態において前記保護キャップの内部に保持された内部キャップと、外筒の一端部に内筒が固定された二重筒構造を形成し、前記内筒は前記外筒内部に位置する内端部および前記外筒から露出しチューブを接続可能な外端部を有する雌型コネクタとを備える。

【0010】

前記内部キャップは、前記環状部から環軸方向に延びる複数の係合脚を有し、前記係合脚の先端部外側に係合凸部が形成され、前記雄型コネクタの先端部は円筒形をなして前記係合脚の係合凸部が内側から係合可能な係合凹部を有し、前記保護キャップの内壁面には内部キャップ保持部が形成されている。前記内部キャップの係合凸部と前記雄型コネクタの係合凹部との係合力は、前記内部キャップ保持部が前記内部キャップを保持する力より大である。

【0011】

前記内部キャップを保持した前記保護キャップが前記雄型コネクタに装着されたときに前記係合脚の係合凸部が前記雄型コネクタの係合凹部に係合する。前記保護キャップが前記雄型コネクタから取り外されるときに、前記内部キャップは前記雄型コネクタの先端に保持されて前記保護キャップから離脱する。前記内部キャップが保持された前記雄型コネクタが前記雌型コネクタと接続されたとき、前記内筒の内端部が、前記殺菌剤含浸部材を貫通して流路が開通する。

【発明の効果】

【0012】

この構成によれば、雄型コネクタ先端部分が細菌に汚染されることを、内部キャップの殺菌剤含浸部材により防止することができる。また、保護キャップの交換を行う毎に、内部キャップが新しいものに交換されるので、煩雑な操作を必要とせずに、新鮮な殺菌剤含浸部材による殺菌が可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0013】

本発明の医療用コネクタシステムにおいて、好ましくは、前記雌型コネクタは内部キャップ保持部を有し、前記雄型コネクタと前記雌型コネクタの接続が解除されたとき、前記内部キャップが前記内部キャップ保持部により前記雌型コネクタの内部に保持されて、前記雄型コネクタの先端から離脱するように構成される。

【0014】

また好ましくは、前記雄型コネクタは、先端部に内腔を遮蔽する隔壁部材を有し、前記内部キャップが先端に保持された前記雄型コネクタを、前記雌型コネクタと接続したとき、前記内筒の内端部が、前記内部キャップの殺菌剤含浸部材および前記雄型コネクタの隔壁部材を貫通して流路が開通する構成とする。

【0015】

また好ましくは、前記雄型コネクタの外表面は、周方向に延びる周方向段差部が形成されてその先端側が基端側よりも径小であり、更に前記周方向段差部から基端側に延びコネクタ軸方向に対して傾斜した傾斜部を含むガイド溝が形成され、前記保護キャップは、その開口端部近傍の内壁面にガイド突起が形成される。前記保護キャップの開口部から前記雄型コネクタを挿入し、前記保護キャップの前記ガイド突起が前記雄型コネクタの前記ガイド溝に合致した状態で、前記保護キャップと前記雄型コネクタを相互に押し付けながら回動させることにより、前記ガイド突起が前記ガイド溝を摺動し、前記ガイド溝の傾斜部のねじ作用による駆動力を受けて前記雄型コネクタが前記保護キャップの奥部に引き込まれるとともに、前記内部キャップの前記係合凸部が、前記雄型コネクタの係合凹部に係合する。

【0016】

また好ましくは、前記雄型コネクタはその先端部内周面に、前記内部キャップが装着されたときその係合脚の側部に当接する制止突起を有し、前記雌型コネクタの前記外筒は、その開口端部近傍の内壁面に形成されたガイド突起、およびコネクタ軸方向に対して傾斜した傾斜部を含むガイド段差部を有し、前記内部キャップは、前記環状部の外周面に突起を有する。前記内部キャップを保持した前記雄型コネクタを前記雌型コネクタの開口部から挿入し、前記外筒の前記ガイド突起が、前記雄型コネクタの前記ガイド溝に合致した状態において、前記雌型コネクタと前記雄型コネクタを相互に押し付けながら回転させることにより、前記ガイド突起が前記ガイド溝を摺動し、前記ガイド溝の傾斜部のねじ作用による駆動力を受けて前記雄型コネクタが前記雌型コネクタの奥部に引き込まれる。それとともに、前記内部キャップの前記係合脚が前記雄型コネクタの制止突起により前記雄型コネクタに対する回転を規制された状態で、前記環状部の突起が前記雌型コネクタのガイド段差部の傾斜部を摺動し、前記内部キャップに対して前記雄型コネクタから離間する向きの軸方向の力が作用して、前記内部キャップと前記雄型コネクタの係合が解除され、更に、前記内部キャップが、前記外筒の内部キャップ保持部に保持された状態になる。

【0017】

また好ましくは、前記雌型コネクタの前記内部キャップ保持部は、前記ガイド段差部の前記傾斜部の奥側に連続して設けられた水平段差部により構成され、前記内部キャップの前記環状部の突起が、前記水平段差部に当接することにより、前記内部キャップは前記外筒の開口側に向かう軸方向の移動を阻止され、前記雌型コネクタ内に保持される。

【0018】

また好ましくは、前記雌型コネクタの前記内部キャップ保持部は、前記外筒の内壁の一部が前記内部キャップの環状部外周面に当接するか、または前記内筒の内端部外壁の一部が前記内部キャップの環状部内周面に当接するように寸法を設定することにより構成され、前記内部キャップが摩擦力で保持される。

【0019】

上記構成の医療用コネクタシステムに用いられる保護キャップ組立体を、一端が閉塞された略円筒形状を有する前記保護キャップと、その保護キャップの奥部に保持され、殺菌剤含浸部材を環状部の内側に保持する前記内部キャップとを備えた構成であって、前記保護キャップの内壁面には前記内部キャップを保持する内部キャップ保持部が形成され、前記内部キャップは、前記環状部の周縁部から環軸方向に延びる複数の係合脚を有し、前記係合脚の先端には外側に突出した係合凸部が形成され、前記内部キャップが、前記係合脚の先端を前記保護キャップの開口側に向けて前記内部キャップ保持部に保持された構成とすることができる。

【0020】

以下に、本発明の実施の形態における医療用コネクタシステムの構成について、図1～図7を参照して具体的に説明する。本実施の形態は、腹膜透析におけるチューブ接続用のコネクタを一適用例として説明される。

【0021】

図1(a)に分解した状態で示されるように、この医療用コネクタシステムは、雄型コネクタ1、保護キャップ2、内部キャップ3、および雌型コネクタ4から構成される。雄型コネクタ1は、例えば、患者の腹腔に埋植された腹膜カテーテルに繋がるエクステンションチューブ5の先端に接続される。雌型コネクタ4は、例えばツインバッグ、BF、APD等の腹膜透析装置の回路先端に接続されるコネクタであり、腹膜透析装置の回路先端であるエクステンションチューブ5に接続される。内部キャップ3は、最初は図1(b)の右側に示されるように、保護キャップ2の内部に保持された状態で供給される。内部キャップ3は後述するように、殺菌剤含浸部材、例えば殺菌剤を含浸させた殺菌用スポンジを備えている。以下に、この医療用コネクタシステムの各要素の機能の概要について、図1(b)～(g)を参照して説明する。

【0022】

保護キャップ2は、雄型コネクタ1と雌型コネクタ4が接続されていないときに雄型コ

ネクタ1に装着され、コネクタ先端を保護する。そのためには、図1(b)に示すように、内部キャップ3を保持した保護キャップ2を雄型コネクタ1と対向させて、図1(c)に示すように装着する。この状態で内部キャップ3に設けた殺菌剤含浸部材が雄型コネクタ1の先端部を包囲し、殺菌作用が機能する。

【0023】

雄型コネクタ1と雌型コネクタ4を接続するときには、まず、保護キャップ2を雄型コネクタ1から離脱させ、除去する。その離脱操作に伴い、内部キャップ3は、図1(d)に示すように、保護キャップ2から雄型コネクタ1に移動する。雌型コネクタ4は、図1(e)に示すように雄型コネクタ1と対向させられ、図1(f)に示すように雄型コネクタ1と接続されて、流路が形成される。図1(g)に示すように雄型コネクタ1と雌型コネクタ4の接続を解除する際には、後述する操作に伴い、内部キャップ3は最終的に雌型コネクタ4内に移動し、雌型コネクタ4とともに廃棄される。

【0024】

以上の各構成要素について、以下に詳細に説明する。まず、雄型コネクタ1について、図2A~図2Cを参照して説明する。図2Aは雄型コネクタ1の斜視図、図2Bは正面図、図2Cは断面図である。

【0025】

雄型コネクタ1の本体は樹脂製で概略円筒状をなし、先端部10と、中央のガイド部11と、後端側の基端部12を含む。図2Cに示すように、先端部10、ガイド部11および基端部12を貫通する内腔が形成されている。なお、図2B、図2Cには、図2Aの状態に対して、雄型コネクタ1を本体の軸の回りに90°回転した状態で示されている。

【0026】

先端部10には、内腔により形成される流路を遮蔽して保護し、液密を確保するための隔壁部材、たとえばゴム製セプタム(スリット入り)13が装着されている。なおセプタム13は、雌型コネクタ4との結合状態における液密を確保するためには有効であるが、必須ではなく、他の方法で液密を確保してもよい。ガイド部11と基端部12の境界部には、環状溝14およびフランジ15が形成され、環状溝14にはOリング14aが装着されている(図2Aには図示せず)。

【0027】

先端部10には、凹部101が形成され、内部キャップ3を収容するために用いられる。先端部10の側壁には、一対の係合孔102が設けられている。この係合孔102は内部キャップ3に係止するために用いられる。これについては後述する。各係合孔102に隣接して制止突起103が形成されている。

【0028】

ガイド部11の外周面には、ガイド溝111が形成されている。ガイド溝111は、本体の軸に対称に一対設けられており、図2Aにおいては一方が裏側に位置している。ガイド溝111は必ずしも一対必要ではなく、一本のみでも機能的には十分である。ガイド溝111は、本体の軸方向に伸びている軸方向部111a、傾斜した傾斜部111b、および周方向に伸びている周方向部111cを有する。周方向部111cには、ガイド溝111の終端部111eを分離する係止凸条111dが形成されている。先端部10の外径は、ガイド部11よりも小さくなっており、それにより先端部10とガイド部11の境界の外表面には、周方向に延びる環状段差部112が形成されている。ガイド溝111の軸方向部111aの先端は、環状段差部112に繋がっている。

【0029】

基端部12には、エクステンションチューブ(図示せず)が接続される管状のチューブ接続部121が形成されている。チューブ接続部121の外側に保護筒122が形成され、保護筒122の両側につまみ123が設けられている。つまみ123は、雄型コネクタ1を回動させる際に把持するために用いられる。

【0030】

図2Cに示すように、本実施の形態では、基端部12は、先端部10およびガイド部1

1とは別体に形成され、その一部がガイド部11の内腔に嵌合している。この構造は、先端部10内にセプタム13を保持するための手段を構成するものである。すなわち、先端部10の内腔に形成されたフランジ状のセプタム保持部104と、基端部12の押圧端124との間にセプタム13が挟持される。セプタム保持部104の内周縁には鉤部105が形成され、セプタム13の面に形成された段差部と係合して、セプタム13の変形を抑制する。樹脂成形の便宜上、このような構造が好ましいが、セプタム13を保持する他の構造を採用することもできる。

【0031】

次に、保護キャップ2について、図3A、図3Bに示す断面図を参照して説明する。図3Aは内部キャップが装填されていない状態、図3Bは内部キャップが装填された状態を示す。保護キャップ2は樹脂製であり、先端が閉じた中空の略円筒形状を有する。その開口部20近傍の内壁面には、ガイド突起21が形成されている。ガイド突起21は対称に一对設けられているが、図には一方のみが示されている。保護キャップ2の閉じた端部側の内周面には、保持爪22が形成されている。この部分に、図3Bに示すように内部キャップ3が保持される。

【0032】

保護キャップ2の開口部20から雄型コネクタ1が挿入された際には、ガイド突起21が雄型コネクタ1のガイド溝111に係合し、その係合により、保護キャップ2と雄型コネクタ1の相互の位置関係を調整するための案内作用が得られる。その動作については、後述する。

【0033】

次に内部キャップ3について、図4A～図4Cを参照して説明する。図4Aは内部キャップ3の斜視図、図4Bは正面図、図4Cは図4BにおけるA-A断面図である。内部キャップ3は樹脂製であり、環状部30と、2本の係合脚31を有する。環状部30の外周面には、周方向における一对の係合脚31の間に配置された一对の突起32が形成されている。突起32の一方の側に段差部32aが形成されている。係合脚31の先端には、外側に突出した係合凸部33が形成されている。

【0034】

環状部30の内部には、殺菌用スポンジ34が取り付けられている（図4B、4Cにのみ示し、図4Aには図示を省略）。殺菌用スポンジ34は、環状部30の開口部30aを遮蔽するように配置され、例えば、環状部30のフランジ30bに超音波溶接により固定されている。殺菌用スポンジ34には、後述する雌型コネクタ4の内端部41bが貫通可能な一文字もしくは十字のスリット（図示せず）が設けられ、殺菌剤として例えばポビドンヨードが含浸されている。

【0035】

上述の通り内部キャップ3は、最初は図3Bに示したように保護キャップ2内に收容されている。保持爪22により内部キャップ3の環状部30が挟持され、摩擦係合により支持されている。保護キャップ2を雄型コネクタ1に装着する際には、相互の回転に伴い、係合脚31の係合凸部33は、雄型コネクタ1の先端部10の内周面を摺動する。このとき、係合凸部33が先端部10の内周面を摺動する際の摩擦力により、保護キャップ2の保持爪22による内部キャップ3の保持が解除されることのないように、保持力を設定する必要がある。望ましくは、内部キャップ3の突起32により形成された段差部32aに当接して、内部キャップ3の回転を制止する回転制止部を保護キャップ2内に設ける。

【0036】

内部キャップ3が、雄型コネクタ1の先端部10に保持された状態を図5A～5Cに示す。保護キャップ2を雄型コネクタ1に装着した状態では、雄型コネクタ1の先端部10の係合孔102に、内部キャップ3の係合脚31の係合凸部33が係合する。それにより、先端部10に内部キャップ3を保持可能となる。係合孔102は、必ずしも貫通孔である必要はなく、内部キャップ3係合凸部33が係合可能な範囲で窪みが形成されていればよい。

【0037】

上述のように、内部キャップ3は、保護キャップ2の保持爪22との摩擦係合により保護キャップ2内に保持される。また、雄型コネクタ1の係合孔102と内部キャップ3の係合凸部33の係合により、内部キャップ3は雄型コネクタ1に保持される。雄型コネクタ1の係合孔102により内部キャップ3を保持する力は、保護キャップ2の保持爪22により内部キャップ3を保持する力よりも大きくなるように設定されている。

【0038】

次に雌型コネクタ4について、図6Aおよび図6Bに示す断面図を参照して説明する。図6Aは内部キャップが装填されていない状態、図6Bは内部キャップが装填された状態を示す。

【0039】

雌型コネクタ4は、樹脂製の外筒40と内筒41からなる二重筒の形状を有し、外筒40の一端部に内筒41が固定されている。外筒40は、内筒41が固定された側の反対側に開口部42を有し、雌型コネクタ4としての先端部を構成する。内筒41は、外筒40の外側に露出した外端部41aと、外筒40の内側に位置する内端部41bとからなる。外端部41aは、例えば腹膜透析装置の回路先端であるチューブと接続可能である。外端部41aの外側は、外筒40の一端部が張り出した保護筒40aにより包囲されている。保護筒40aの外周面の両側には、図6には図示されないが、雄型コネクタ1のつまみ123と同様のつまみが形成されている。内端部41bは、雌型コネクタ4と雄型コネクタ1とが接続される際に、雄型コネクタ1の先端に装着された内部キャップ3の殺菌用スポンジ34、および先端部10に保持されたゴム製セプタム13のスリットを押し広げながら貫通して雄型コネクタ1の内部に達し、流路を開通させる。

【0040】

外筒40の開口部42近傍の内壁には、ガイド突起43が形成されている。このガイド突起43は、保護キャップ2に形成されたガイド突起21と同様の形状および機能を有する。外筒40の奥部の内壁には、ガイド段差部44が形成されている。ガイド段差部44は、外筒40の軸方向に対して傾斜した傾斜部44aと、軸方向に直交する水平段差部44bからなる。水平段差部44bは、外筒40の奥部に内部キャップ3を保持するための手段として機能する。すなわち、内部キャップ3が外筒40の奥部に押し込まれたときに、突起32が水平段差部44bに当接した状態になれば、その状態が保持される。その際の動作については、後述する。

【0041】

内部キャップ3の保持手段としては、外筒40の奥部内壁の一部が内部キャップ3の環状部30の外周面に当接し、摩擦力により内部キャップ3を保持する構成を用いることもできる。あるいは、内筒41の外周面と、内部キャップ3のフランジ30bの内周面の当接により、内部キャップ3が摩擦力で保持されるように構成してもよい。

【0042】

なお、図6A、6Bでは、ガイド突起43およびガイド段差部44は、外筒40の壁材とは別体の部材上に形成された状態が示されている。樹脂成形の便宜上、このような構造とするのが好ましい場合もあるが、外筒40の壁材に一体に形成することも可能である。また、雌型コネクタ4の外筒40の先端部には、使用前には、破断可能なフィルム（図示せず）が設けられ、使用直前まで雌型コネクタ4の内筒及び流路を保護するように構成することが好ましい。

【0043】

次に、以上の構成を有する医療用コネクタシステムの動作について説明する。

【0044】

最初に、雄型コネクタ1に対して保護キャップ2を装着し、さらに離脱させる際の動作について、図7を参照して説明する。但し、雄型コネクタ1、保護キャップ2および内部キャップ3の構造の細部については、図2A～C、図3A、B、図4A～Cを参照のこと。

【0045】

図7(a)～(d)には、保護キャップ2を固定した状態で雄型コネクタ1を回転させた場合の、回転途中の各角度位置での状態が図示されている。図7(a)における雄型コネクタ1は、図2Aの角度位置にある。この状態からその基端側から見て右回りに90度、雄型コネクタ1を回転させることにより、図7(d)に至る。また、図7(e)には、図7(d)の状態から、保護キャップ2を90度回転させた状態が示されている。

【0046】

まず図7(a)に示すように、内部キャップ3が収容された保護キャップ2と雄型コネクタ1を対向させて、図7(b)に示すように、雄型コネクタ1を保護キャップ2に挿入する。それに伴い、保護キャップ2内壁面に形成されたガイド突起21が、雄型コネクタ1の外周面の環状段差部112に当接する(図2～4参照)。

【0047】

次に保護キャップ2に対して雄型コネクタ1を回転させれば、ガイド突起21は環状段差部112を摺動した後、ガイド溝111の軸方向部111aの位置に合致する。それにより、雄型コネクタ1を保護キャップ2に対して更に挿入可能な状態となる。その位置から図7(c)に示すように、雄型コネクタ1を押し込みながら右回りに回転させる。それにより、ガイド突起21がガイド溝111の傾斜部111bに沿って摺動する。それにより、ガイド突起21とガイド溝111の係合を介したねじの作用により、雄型コネクタ1は、保護キャップ2の最奥部まで引き込まれる。更に回転させることにより、ガイド突起21は周方向部111cに入り込み、さらに係止凸条111dを越えて終端部111eに至る。その結果、ガイド突起21と終端部111eの係合により、保護キャップ2と雄型コネクタ1は、軸方向に相互に引き離すことができない状態に結合される。

【0048】

この過程で、雄型コネクタ1の先端部10の凹部101内に、内部キャップ3の係合脚31が進入する。内部キャップ3は保護キャップ2の保持爪22により保持されているため、係合脚31の係合凸部33は、雄型コネクタ1の先端部10の内周面を摺動する。最後には、図7(d)に示すように、係合凸部33が雄型コネクタ1の係合孔102と係合し、接続が完了する。この状態で、内部キャップ3に保持された殺菌用スポンジ34により、雄型コネクタ1の先端部が殺菌される。また、保護キャップ2の開放端の内周面とOリング14aが当接することにより、保護キャップ2内部の液密が保たれ、雄型コネクタ1の先端は、外気から保護される。

【0049】

次に、図7(d)の状態から、保護キャップ2を雄型コネクタ1に対して接続時の逆回りに回転させると、内部キャップ3は、係合凸部33と雄型コネクタ1の係合孔102が係合していることにより、雄型コネクタ1とともに保護キャップ2に対して回転する。回転に伴い、保護キャップ2のガイド突起21がガイド溝111を摺動し、軸方向部111aに到達する。その状態から雄型コネクタ1と保護キャップ2を軸方向に引き離すと、内部キャップ3が雄型コネクタ1先端に装着されたまま保護キャップ2から外され、図7(e)に示す状態になる。

【0050】

次に図8を参照して、雄型コネクタ1と雌型コネクタ4とを接続する際の動作について説明する。但し、雄型コネクタ1、内部キャップ3、および雌型コネクタ4の構造の細部については、図2A～C、図4A～C、および図6A、Bを参照のこと。

【0051】

図8(a)～(d)には、雄型コネクタ1を図7(e)と同じ角度で固定した状態で雌型コネクタ4を回転させたときの、回転途中の各角度位置での状態が図示されている。図8(a)における雌型コネクタ4は図6の角度で示され、内端部41bの側から見て右回りに90度回転させることにより、図8(d)の状態に至る。図8(e)には、図8(d)の状態から雄型コネクタ1を、チューブ接続部121の側から見て90度左回りに回転させた状態が示されている。

【0052】

まず図8(a)に示すように、雄型コネクタ1と雌型コネクタ4とを対向させる。この状態においては、雄型コネクタ1の先端に内部キャップ3が装着されている。次に図8(b)に示すように、雄型コネクタ1を雌型コネクタ4の外筒40内に挿入する。その際、雌型コネクタ4の内壁面に形成されたガイド突起43が、雄型コネクタ1外周面の環状段差部112に当接する。雌型コネクタ4を適当に回転させて、雄型コネクタ1のガイド溝111の軸方向部111aにガイド突起43を合致させれば、雄型コネクタ1を雌型コネクタ4に対して更に挿入可能な状態となる。なお、内部キャップ3の係合脚31は、雄型コネクタ1の先端部10の凹部101内にされているので、雄型コネクタ1の外周面から突出することがない。従って、雄型コネクタ1を雌型コネクタ4の外筒40内に挿入する際に外筒40内壁面との干渉が少なく、挿入あるいは回転の操作を円滑に行うことができる。

【0053】

雄型コネクタ1を更に奥まで挿入するためには、雄型コネクタ1を押し込みながら、雌型コネクタ4を右回りに回転させる。それに伴い、ガイド突起43がガイド溝111の傾斜部111bに沿って摺動する。それにより、ガイド突起43とガイド溝111がねじの作用を生じ、雄型コネクタ1は、図8(c)に示すように、雌型コネクタ4の最奥部まで到達する。その状態で、雄型コネクタ1の先端部に装着された内部キャップ3の突起32は、図6Aに示されるガイド段差部44の傾斜部44aに対して、周方向における右側に位置する。

【0054】

更に回転させることにより、ガイド突起43は周方向部111cに入り込み、ガイド突起43が周方向部111cを摺動する過程で、内部キャップ3の環状部30に設けられた突起32は傾斜部44aに当接する。係合脚31の側面と雄型コネクタ1の制止突起103との当接を介して付与される回転力により、突起32は傾斜部44aを摺動する。それにより、内部キャップ3は、雌型コネクタ4の奥部に向かう軸方向の力を傾斜部44aから受ける。その結果、図8(d)に示すように、内部キャップ3の係合脚31に形成された係合凸部33と、雄型コネクタ1の係合孔102との係合が外れる。最終的に内部キャップ3の突起32は、雌型コネクタ4のガイド段差部44の水平段差部44bに至る。その状態で、内部キャップ3は雌型コネクタ4内に保持される。つまり、雄型コネクタ1と雌型コネクタ4の接続を解除するために、後述のように雄型コネクタ1を左回りに回転させても、係合孔102と係合凸部33との係合が外れているため、内部キャップ3が回転させられることはない。しかも、内部キャップ3の突起32と水平段差部44bとが係合しているため、内部キャップ3が雌型コネクタ4から外れる向きに軸方向の移動を生じることもない。

【0055】

また、上述の通り、雌型コネクタ4の内筒41の内端部41bは、雌型コネクタ4と雄型コネクタ1とが接続される過程において、内部キャップ3の殺菌用スポンジ32、および雄型コネクタ1の先端部10に保持されたセプタム13のスリットを押し広げながら貫通して、雄型コネクタ1の内部に至り流路を開通させる。その際、雌型コネクタ4の内筒41は、殺菌用スポンジ32によって殺菌される。

【0056】

雌型コネクタ4と雄型コネクタ1の接続を解除する時には、雄型コネクタ1を左回りに回転させる。それによりガイド突起43とガイド溝111の係合が外れて、両コネクタを軸方向に引き離すことができる。その際に上述の通り、内部キャップ3は雌型コネクタ4に留置される(図8(e))。

【0057】

その後、新しい保護キャップ2を雄型コネクタ1に装着すれば、新しい内部キャップ3が雄型コネクタ1の先端に装着され、上述のとおり、雄型コネクタ1の先端部分に対する殺菌作用を維持することができる。

【産業上の利用可能性】

【0058】

本発明の医療用コネクタシステムによれば、内部キャップの殺菌剤含浸部材により、雄型コネクタ先端部分の汚染を回避し、また、保護キャップの交換を行う毎に内部キャップが新しいものに交換されて、煩雑な操作を必要とせずに、適時に新鮮な殺菌剤含浸部材による殺菌が可能となるので、腹膜透析や輸液用等における流路接続のためのコネクタとして適している。

【図面の簡単な説明】

【0059】

【図1】 本発明の実施の形態における医療用コネクタシステムを構成する各要素およびそれらの動作を示す正面断面図

【図2A】 同医療用コネクタシステムを構成する雄型コネクタを示す斜視図

【図2B】 同雄型コネクタの正面図

【図2C】 同雄型コネクタの断面図

【図3A】 同医療用コネクタシステムを構成する保護キャップを示す断面図

【図3B】 同保護キャップ内に内部キャップが装填された状態を示す断面図

【図4A】 同医療用コネクタシステムを構成する内部キャップを示す斜視図

【図4B】 同内部キャップの平面図

【図4C】 同内部キャップの断面図

【図5A】 同医療用コネクタシステムを構成する雄型コネクタに内部キャップが装着された状態を示す断面図

【図5B】 同正面図

【図5C】 同断面図

【図6A】 同医療用コネクタシステムを構成する雌型コネクタを示す断面図

【図6B】 同雌型コネクタ内に内部キャップが装填された状態を示す断面図

【図7】 同医療用コネクタシステムを構成する雄型コネクタに保護キャップを装着および離脱させる際の動作を説明するための断面図

【図8】 同医療用コネクタシステムを構成する雄型コネクタと雌型コネクタとを接続および接続解除する際の動作を説明するための断面図

【符号の説明】


【0060】

- 1 雄型コネクタ
- 2 保護キャップ
- 3 内部キャップ
- 4 雌型コネクタ
- 5 エキステンションチューブ
- 10 先端部
- 11 ガイド部
- 12 基端部
- 13 セプタム
- 14 環状溝
- 14a Oリング
- 15 フランジ
- 20 開口部
- 21 ガイド突起
- 22 保持爪
- 30 環状部
- 30b フランジ
- 31 係合脚
- 32 突起


- 32a 段差部
- 33 係合凸部
- 34 殺菌用スポンジ
- 40 外筒
- 40a 保護筒
- 40b つまみ
- 41 内筒
- 41a 外端部
- 41b 内端部
- 42 開口部
- 43 ガイド突起
- 44 ガイド段差部
- 44a 傾斜部
- 44b 水平段差部
- 101 凹部
- 102 係合孔
- 103 制止突起
- 104 セプタム保持部
- 105 鉤部
- 111 ガイド溝
- 111a 軸方向部
- 111b 傾斜部
- 111c 周方向部
- 111d 係止凸条
- 111e 終端部
- 112 環状段差部
- 121 チューブ接続部
- 122 保護筒
- 123 つまみ
- 124 押圧端

【書類名】 図面


【図 1】

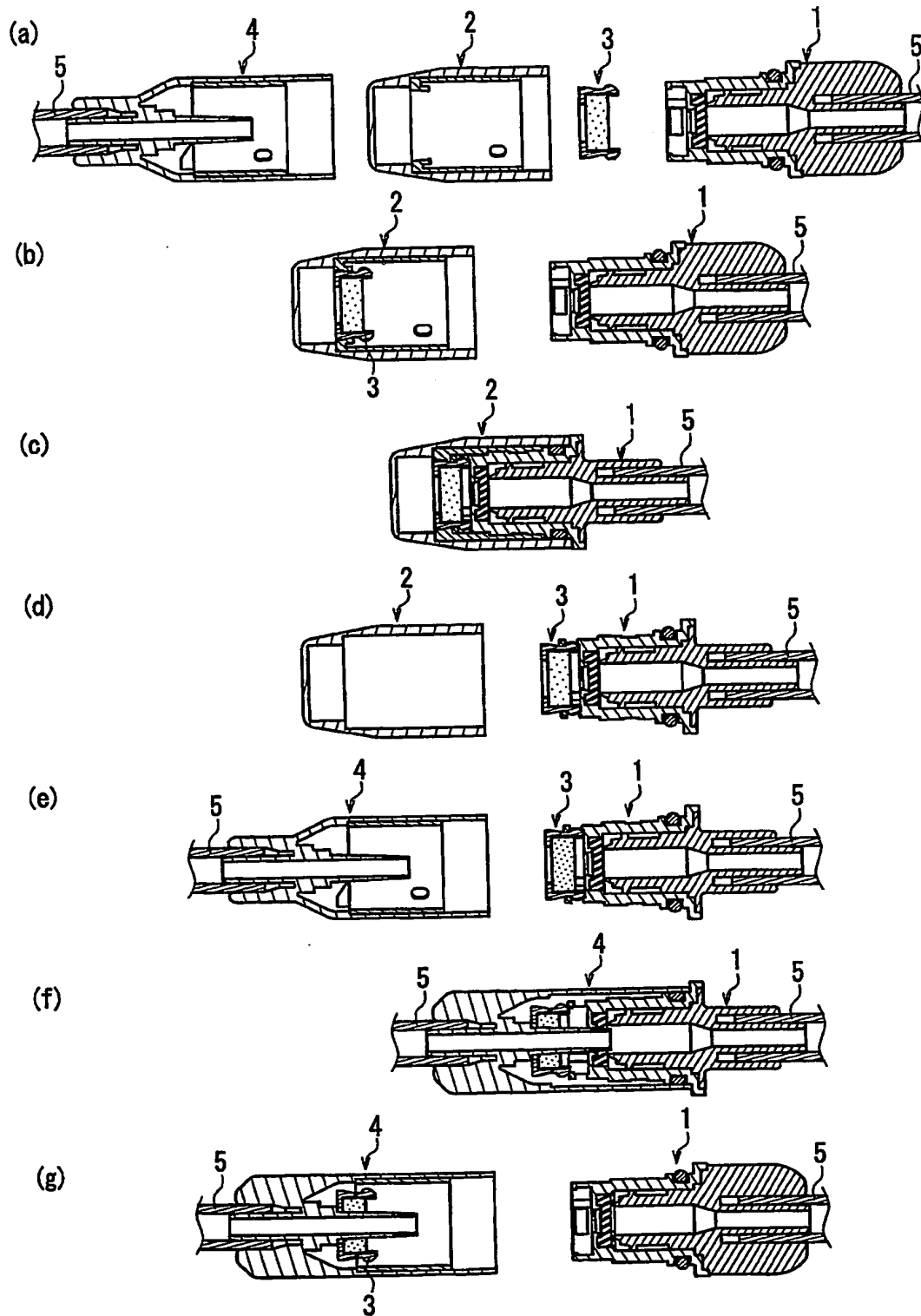


【図 2 A】

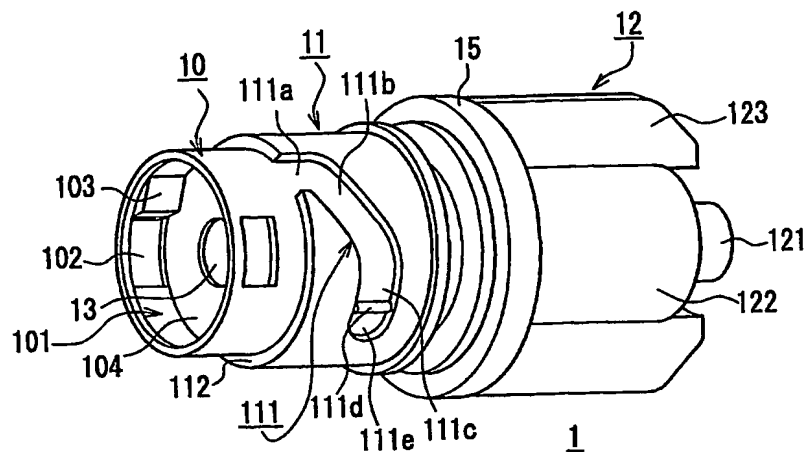


【図 2 B】

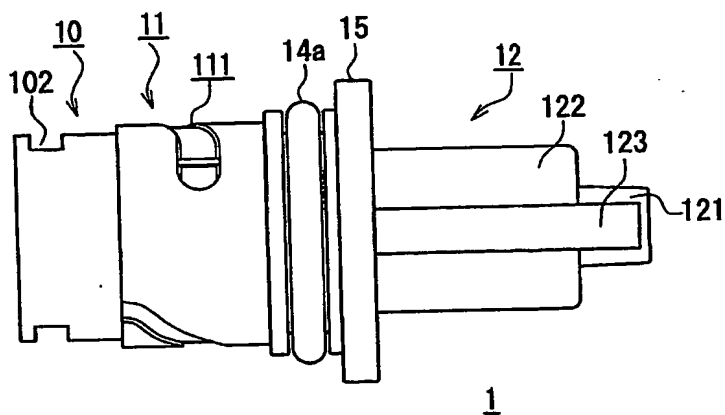


【図 2 C】

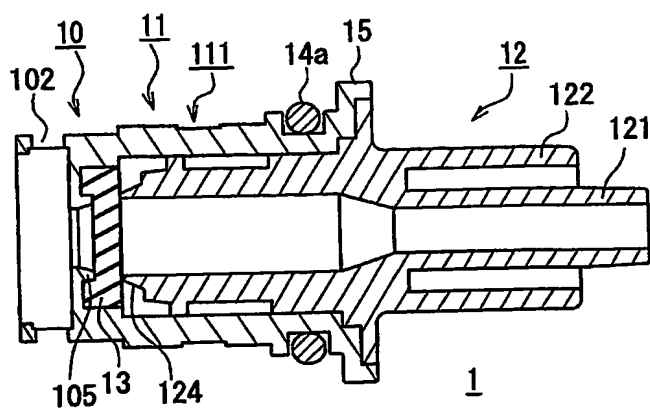


【図 3 A】

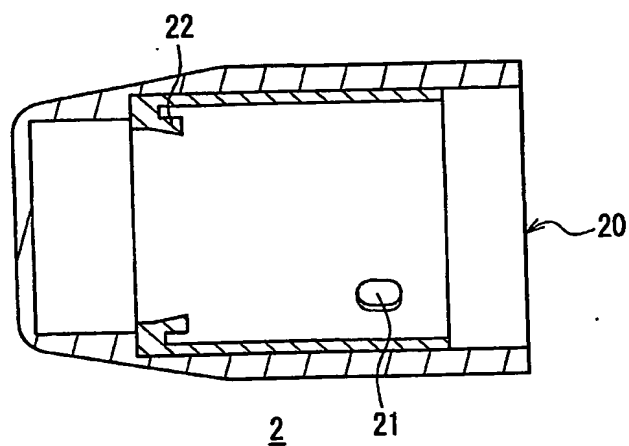


【図 3 B】

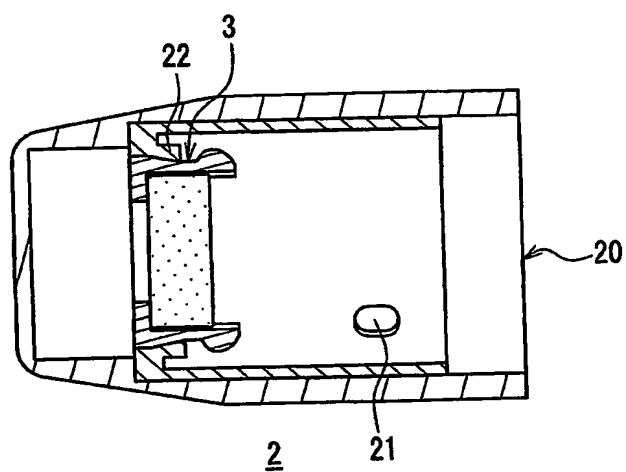


【図 4 A】

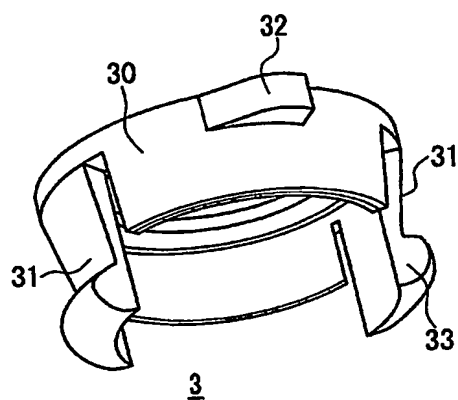


【図 4 B】

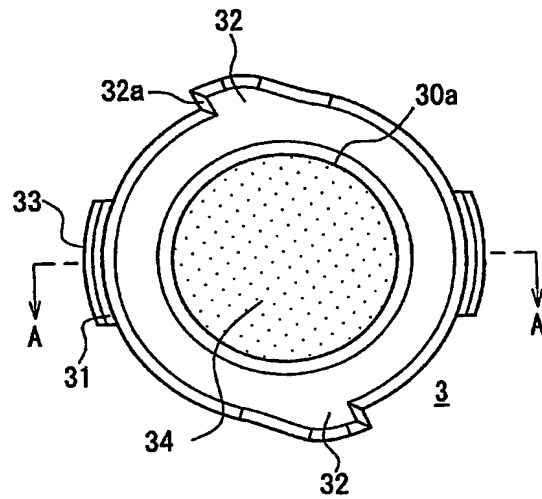


【図 4 C】

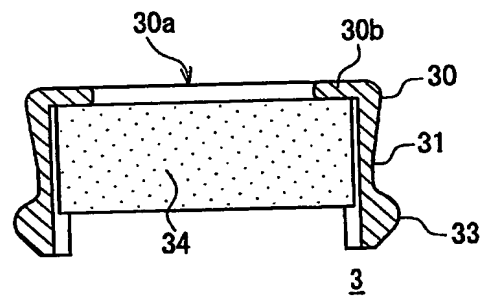


【図 5 A】

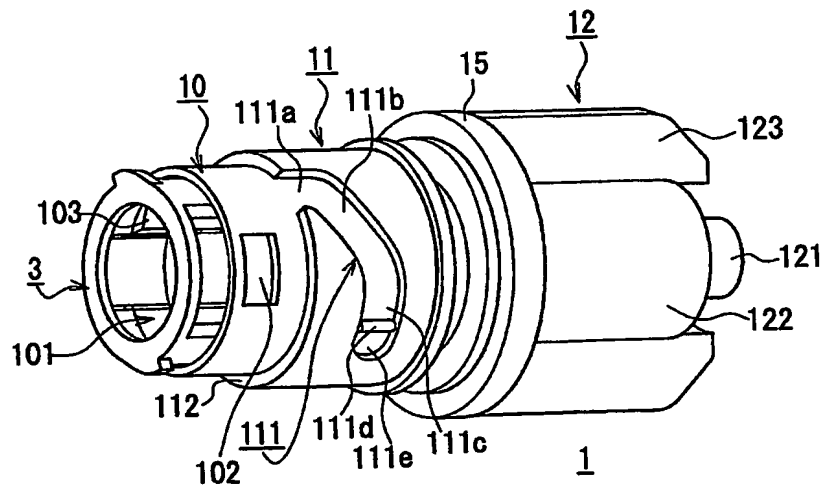


【図 5 B】

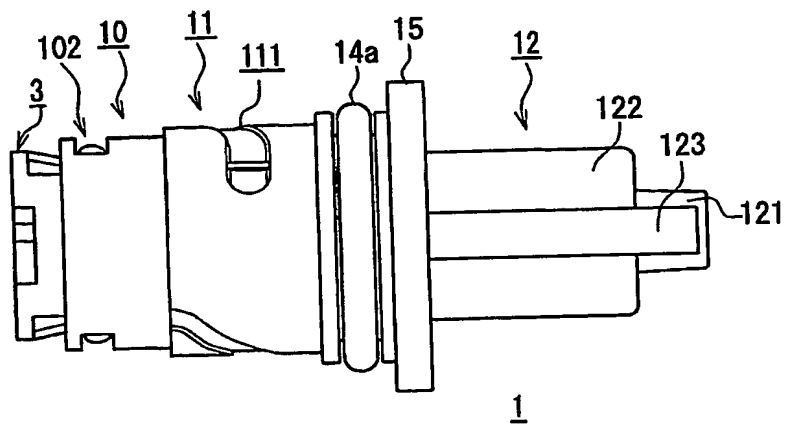


【図 5 C】

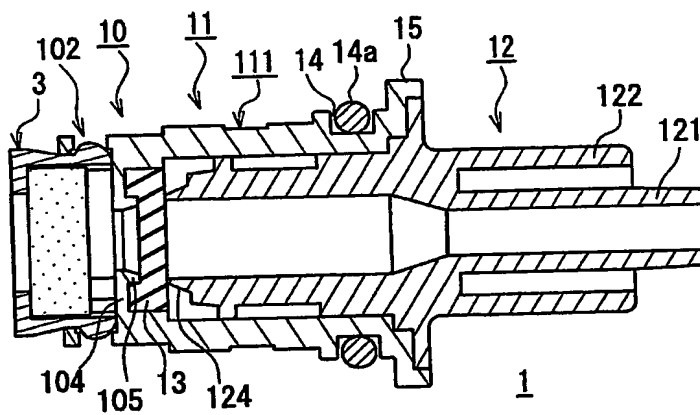


【図 6 A】

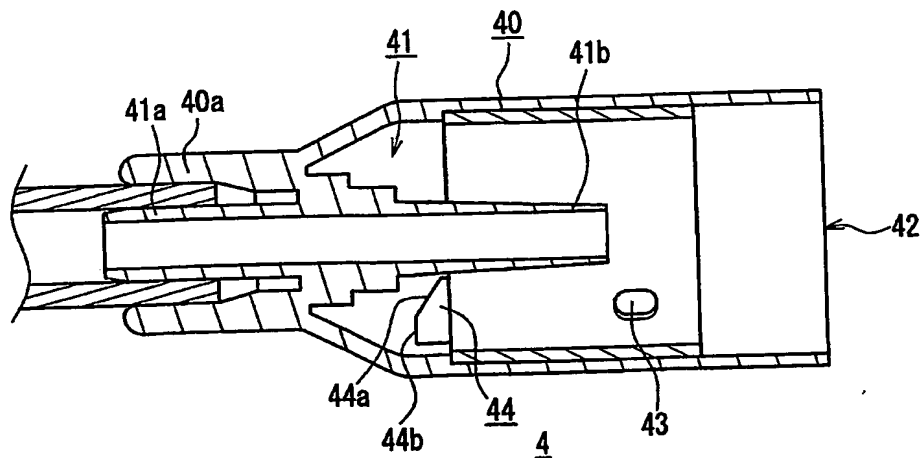


【図 6 B】

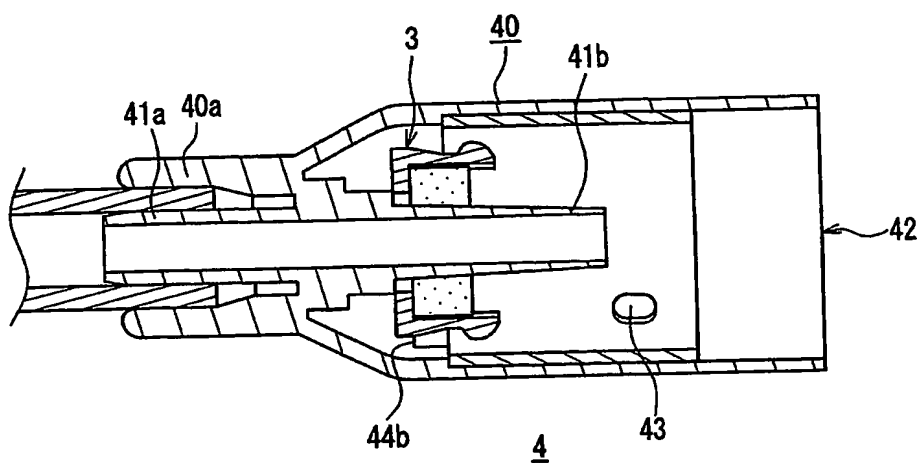

【図 7】

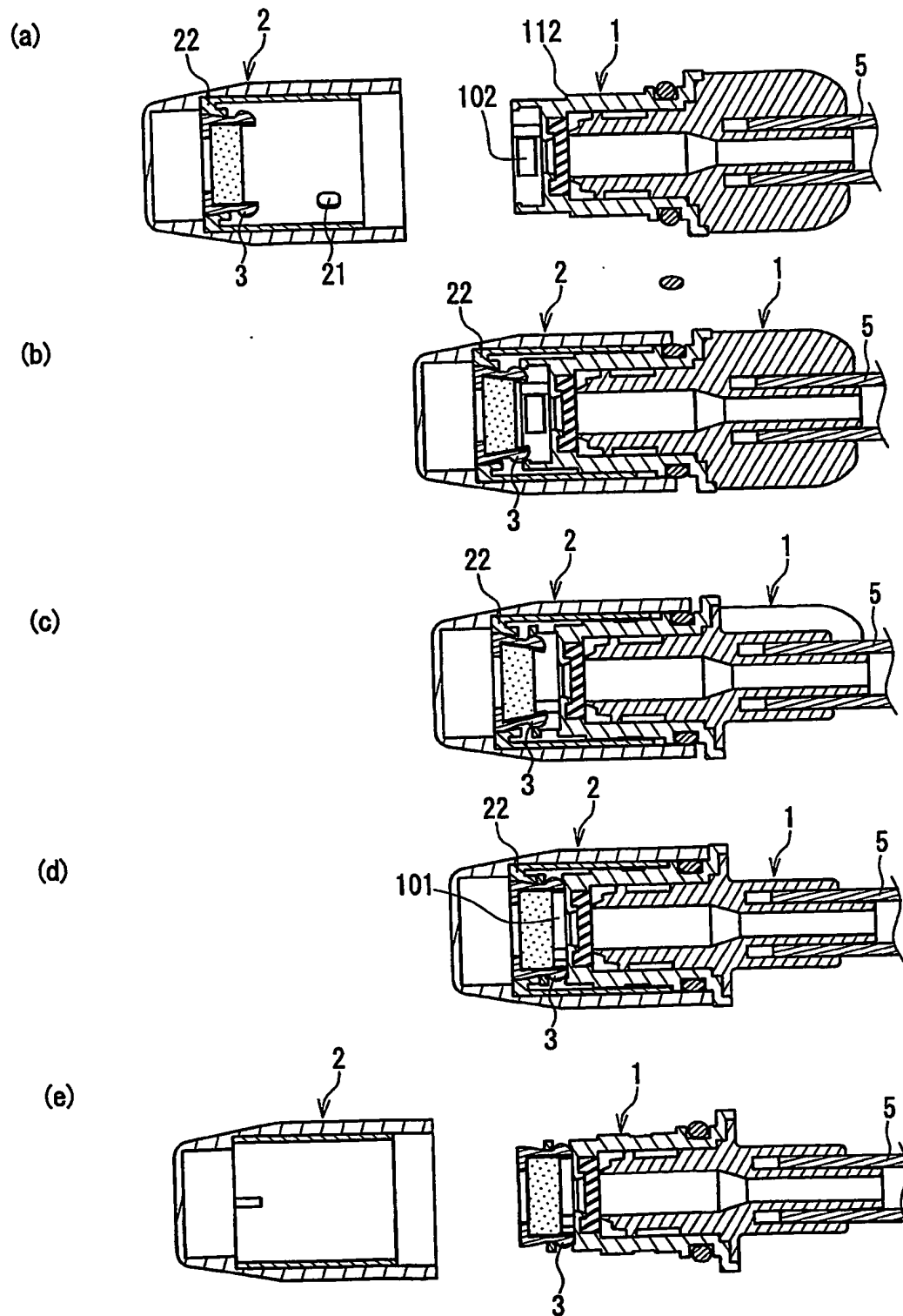

【図 8】

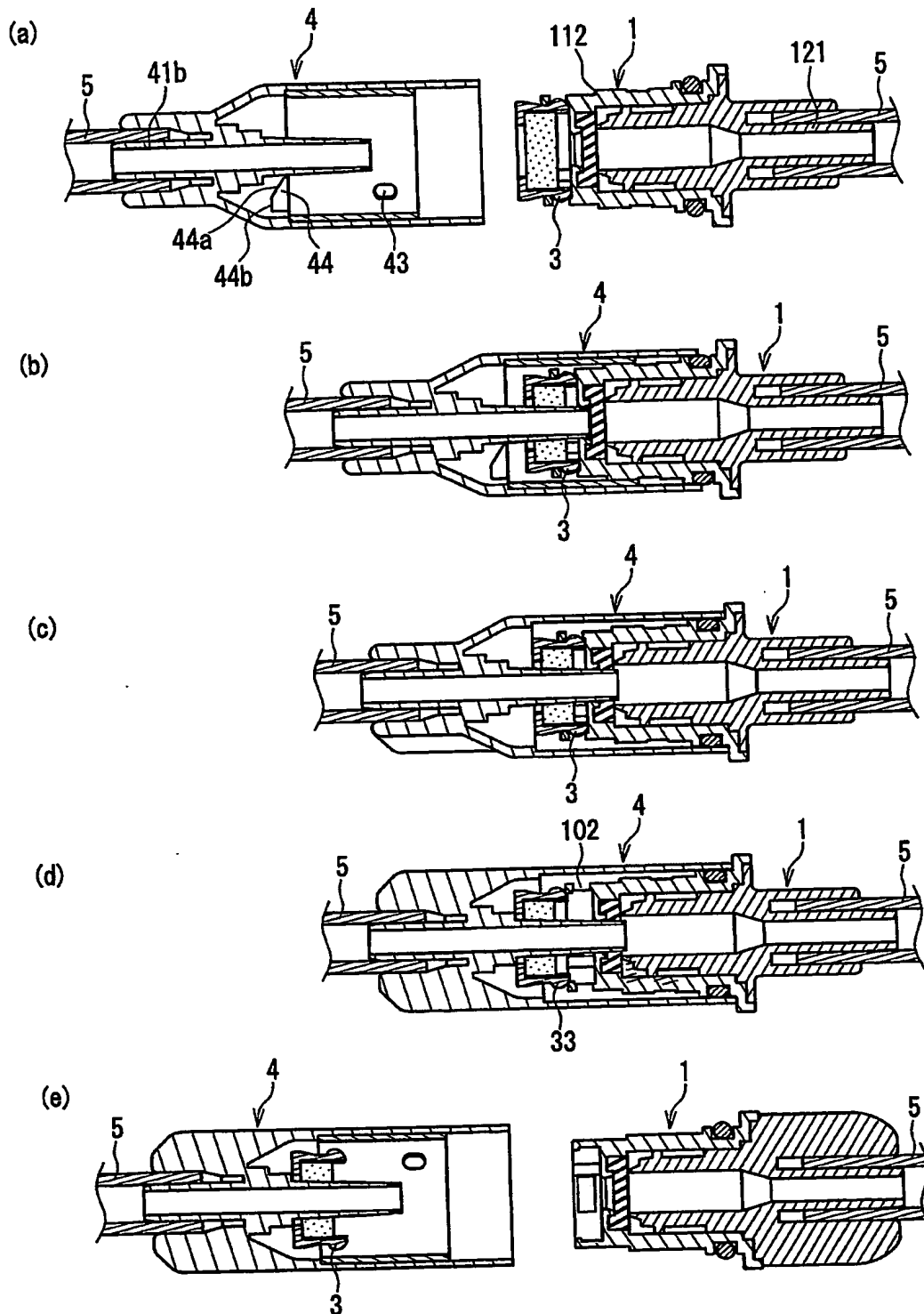

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 接続と離脱が繰り返し行われる際に、簡易な操作により細菌汚染を減少させることが可能な医療用コネクタシステムを提供する。

【解決手段】 雄型コネクタ 1、保護キャップ 2、殺菌剤含浸部材を保持し保護キャップに收容された内部キャップ 3、及び外筒の一端に内筒が固定され、内筒が外筒内部の内端部および露出した外端部を有する雌型コネクタ 4 を備える。内部キャップは係合凸部が形成された係合脚を有し、雄型コネクタの先端部は係合脚の係合凸部が内側から係合可能である。保護キャップの内壁面には内部キャップ保持部が形成され、内部キャップと雄型コネクタの係合力は、内部キャップ保持部が内部キャップを保持する力より大である。内部キャップを保持した保護キャップを雄型コネクタに装着し、その後取外すとき、内部キャップは雄型コネクタに保持されて保護キャップから離脱し、雄型コネクタを雌型コネクタと接続したとき、内筒の内端部が殺菌剤含浸部材を貫通して流路が開通する。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 2 8 4 1 6 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 1 5 3 0 3 0]

1. 変更年月日
[変更理由]
住 所
氏 名

1 9 9 4 年 4 月 2 8 日
名称変更
広島県広島市中区加古町 1 2 番 1 7 号
株式会社ジェイ・エム・エス